Исследование эффекта Комптона.

Дедков Денис, Маслов Артём группа Б01-108а 06.11.2023

Цель и задачи работы:

1. С помощью сцинтилляционного спектрометра исследуется энергетический спектр γ -квантов, рассеянных на графите. Определяется энергия рассеянных γ -квантов в зависимости от угла рассеяния, а также энергия покоя частиц, на которых происходит комптоновское рассеяние.

Описание экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1:

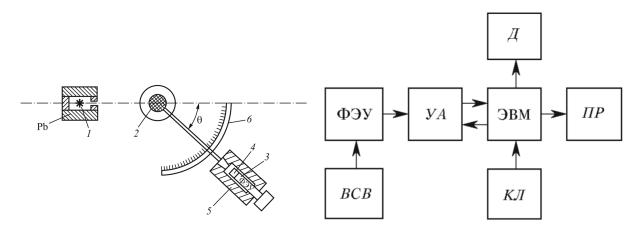


Рис. 1: Слева схема экспериментальной установки. Справа принципиальная схема измерительного комплекса.

Источником излучения 1 является ^{137}Cs , испускающий гамма-кванты с энергией 662 кэВ. Источник излучения помещён в толстостенный свинцовый контейнер с коллиматором. Сформированный коллиматором узкий пучок гамма-лучей попадает на графитовую мишень 2, которой является цилиндр высотой 100 мм и диаметром 40 мм. Кванты, испытывающее комптоновское рассеяние в мишени, регистрируются сцинтилляционным счётчиком (4-5). Счётчик состоит из фотоэлектронного умножителя ФЭУ 3 и сцинтиллятора 4. Сцинтиллятором служит кристалл NaI(Tl) цилиндрической формы высотой 40 мм, диаметром 40 мм, его выходное окно находится в оптическом контакте с фотокатодом ФЭУ. Сигналы, возникающие на аноде ФЭУ подаются на ЭВМ. ФЭУ расположен в светонепроницаемом блоке, закреплённом на штанге, которая может вращаться в горизонтальном направлении. Угол поворота измеряется по лимбу 6.

Оборудование и приборы

Стенд с экспериментальной установкой номер 1.2.3.

- 1. Лабораторная установка для исследования абсолютной активности кобальта-60 ЛУ -4.3-2. Заводской номер №1513. Инвентарный номер №410134174169.
- 2. Высоковольтный блок питания. Инвентарный номер №410134125762.
- 3. Блок оцифровки и обработки данных. Инвентарный номер №410136146940.
- 4. Сцинтилляционный детектор Радек. Инвентарный номер №4013.
- 5. Радиоактивный источник в свинцовой оболочке ^{137}Cs . Энергия гамма-квантов 662 кэВ. Инвентарный номер №11010712637.

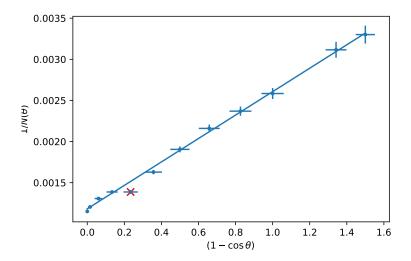


Рис. 2: График зависимости $1/N(\theta)$ от $(1-\cos\theta)$.

Первичные экспериментальные данные

Первичные экспериментальные данные приведены в таблице:

| $\theta,^{\circ}$ | $\sigma_{	heta}$, $^{\circ}$ | N, кан. | σ_N , кан. | ΔN , кан. |
|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 0 | 3 | 869 | 5 | 89 |
| 10 | 3 | 830 | 5 | 79 |
| 20 | 3 | 765 | 5 | 95 |
| 30 | 3 | 721 | 5 | 91 |
| 40 | 3 | 721 | 5 | 89 |
| 50 | 3 | 614 | 5 | 83 |
| 60 | 3 | 525 | 5 | 83 |
| 70 | 3 | 463 | 5 | 79 |
| 80 | 3 | 422 | 5 | 65 |
| 90 | 3 | 387 | 5 | 56 |
| 110 | 3 | 321 | 5 | 50 |
| 120 | 3 | 303 | 5 | 49 |

 θ — угол между исходным направлением гамма-квантов и направлением наблюдения, N — номер канала, зарегистрировавшего наибольшее число частиц (фотопик), ΔN — ширина пика по половине высоты. Оценим погрешности измерения первичных экспериментальных данных. Погрешность измерения угла отклонения определяется геометрией установки $\sigma_{\theta} = \frac{\text{Ширина детектора}}{\text{Расстояние до детектора}} \approx 3^{\circ}$. Погрешность, связанная с конечностью каналов АЦП (всего 1024 канала, ошибка попадания в канал ± 0.5 каналов): $\varepsilon = \frac{0.5}{1024} = 0.05\%$. Из-за шума, связанного с Пуассоновским распределением количества зарегистрированных частиц, возникает погрешность определения положения фотопика, которая оценивается как $\sigma = \pm 5$ каналов. Итоговая погрешность определения положения фотопика $\sigma_{\Phi} = \pm 5$ каналов и одинакова для всех измерений.

Обработка экспериментальных данных

Согласно теории, распределение рассеянных на углы θ гамма-квантов вследствие комптоновского рассеяние определяется соотношением:

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos \theta$$

Номер канала, зарегистрировавший гамма-квант пропорционален его энергии, тогда

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A(1 - \cos \theta)$$

Построим график зависимости $1/N(\theta)$ от $(1-\cos\theta)$.

По пересечению графика с осью ординат определим N(0):

$$N(0) = 846 \pm 11$$

Погрешность оценим по формуле косвенных измерений:

 $y_{\text{аппрокс}} = ax + b$

$$N(0) = \frac{1}{b}$$

$$\varepsilon_{N(0)} = \frac{\sigma_b}{b}$$

По пересечению графика с прямой $\cos \theta = 0$ определим N(90):

$$N(90) = 384 \pm 4$$

Погрешность оценим по формулам:

$$y_{\text{аппрокс}} = ax + b$$

$$N(90) = \frac{1}{b+a}$$

$$\sigma_{N(90)} = \frac{1}{(a+b)^2} \sqrt{\sigma_b^2 + \sigma_a^2}$$

Определим энергию покоя электрона, на котором происходило рассеяние гамма-квантов:

$$mc^2 = E_\gamma \frac{N(90)}{N(0) - N(90)} = 550 \pm 16$$
 кэВ

где $E_{\gamma}=(662\pm1)$ кэВ – энергия гамма-лучей, испускаемых источником. Оценим погрешность определения mc^2 :

$$\sigma_{mc^2} = \sqrt{(\frac{N(90)}{N(0) - N(90)}\sigma_{E_{\gamma}})^2 + (\frac{N(90)E_{\gamma}}{(N(0) - N(90))^2}\sigma_{N(0)})^2 + (E_{\gamma}\frac{N(0)}{(N(0) - N(90))^2}\sigma_{N(90)})^2}$$

Обсуждение результатов и выводы

В работе был проверен закон комптоновского рассеяния:

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos\theta$$

Экспериментальные точки ложатся на прямую в пределах 2σ .

Определено значение энергии покоя электрона

$$mc^2=550\pm16$$
кэВ

Табличное значение энергии покоя электрона

 $mc_{\text{табл}}^2 = 510.998$ кэВ

.